

PH60S-E replacement pH probe is compatible with the following pen testers:

- PH60S, PC60, PH60, PH60F

Technical Specs:

Range	0 to 14 pH	Reference	Ag/AgCl
Housing	Polycarbonate	Temp. sensor	30K Ω thermistor
Junction	Open	Electrolyte	Gel KCL
Sensor Type	LabSen spear glass membrane	Operating temp.	32 to 122°F (0 - 50°C)

How to replace the probe?

Screw off the probe ring, unplug the probe, plug in the new replacement probe (pay attention to the probe's position), and screw on the probe ring.


Notes

1. The spear probe must be stored in the 3M KCL storage solution when not in use.
2. Never store pH probes in purified water such as RO water, tap water, distilled water, or deionized water as they will cause damage to the probe.
3. pH Probes don't last forever. Every pH probe will eventually age and fail even if you don't use it that often. The typical service life of Apera pH probes is 12-24 months depending on the frequency of usage and how well you keep it clean and properly stored. We recommend replacing your probe every 12-18 months to ensure the best accuracy.

Limited Warranty

How Long Does the Coverage Last?

Apera Instruments® (Apera) warrants the PH60-E Replacement Probe (Product) for a period of 6 months from date of purchase by original purchaser or consumer. Proof of purchase is required for the warranty to be effective (store sales receipt for Product showing model number, payment and date of purchase). This warranty is non-transferable and terminates if the original purchaser/consumer sells or transfers the Product a third party.

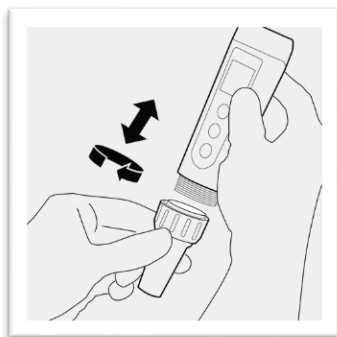

Der APERA INSTRUMENTS PH60S-E Ersatz -Sensor (Elektrode) für die Series 60 ist kompatibel mit:

- PH60S, PC60, PH60, PH60F

Technische Daten:


Messbereich	0 ~ 14 pH	Referenz	Ag/AgCl
Gehäuse	Polycarbonate	Temp. sensor	30K Ω Thermistor
Diaphragma	Offen	Elektrolyt	Gel KCL
Sensor Type	LabSen spitze Glasmembran	Arbeitstemp.	0~50°C (32 ~ 122°F)

Nehmen Sie die Elektrode kappe ab.

Schrauben Sie den Ring an der Elektrode ab und lösen Sie die Elektrode. Stecken Sie die neue Elektrode an das Gerät. Beachten Sie dabei die korrekte Ausrichtung.

Schrauben Sie den Ring wieder an.

PH60S-E Sensor darf niemals in einem trockenen Zustand aufbewahren, da eine dauerhafte Beschädigung verursacht werden kann. Der Sensor muss immer in der 3M KCL Lösung aufbewahrt werden.

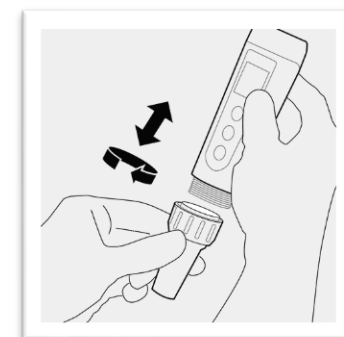

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von Sechs Monate. Die Herstellergarantie beginnt ab dem Erstkaufdatum durch den ersten Endkunden (Rechnungsdatum). Die Garantie umfasst die fehlerfreie Funktion des Produktes. Sollten während der Garantiezeit Mängel des Produktes herausstellen, die auf Herstellungs- oder Verarbeitungsfehlern beruhen, so wird APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH das Produkt oder den defekten Teil kostenfrei reparieren oder (nach Ermessen) ersetzen. Ausgenommen von der Garantie sind insbesondere Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missachtung der Bedienungsanleitung, nicht autorisierte Reparaturen und Modifikationen sowie Verschleiß entstanden sind.