


Sedimentation/Separationsanlage für temperierbare Scheidetrichter

Die für die Phasentrennung von Emulsionen gedachten Apparaturen bieten Platz für bis zu sechs, acht oder siebzehn doppelwandige Scheidetrichter.

Die Temperierung der Scheidetrichter erfolgt dabei mittels Anschluss eines Umwälzthermostates über das Edelstahlgestell. Ein beispielhafter Anwendungsbereich für die Apparatur ist die Trennung von Öl und Wasser.

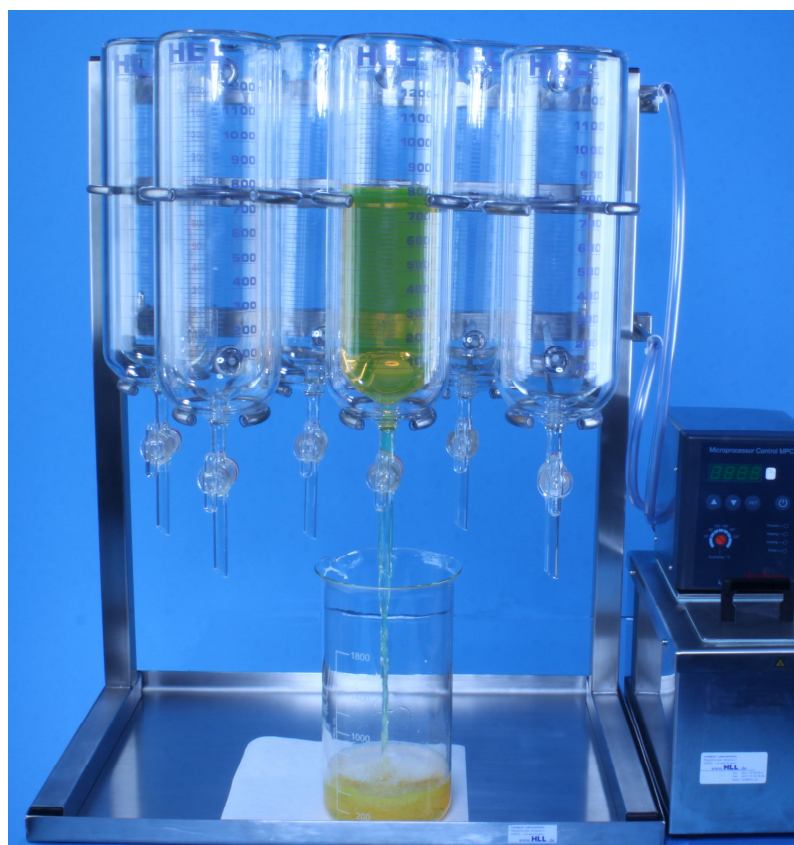


Artikelnummer	Artikelbeschreibung
Bestellinformation	
51816001	Scheidetrichter, doppelwandig graduert 100-1200 ml
51816001G3	Edelstahlgestell für 6 temperierbare Scheidetrichter
51816001G2	Edelstahlgestell für 8 temperierbare Scheidetrichter
51816001G	Edelstahlgestell für 17 temperierbare Scheidetrichter
51816001T	Temperiereinheit mit Schlauchanschluss von 6,8 oder 17 Scheidetrichtern
51816001A	Auffangwanne für Gestell aus Edelstahl
Empfohlenes Zubehör	
105962052	Wärme-Umwälzthermostat MPC
8940115	Thermal H10S Temperierflüssigkeit, 5 l

Art.-Nr.: 51816001

Scheidetrichter, doppelwandig graduert 100-1200 ml mit 6 mm Ablasshahn.
Temperieranschluss GL- Gewinde.
Passend für Gestelle.

**Art.-Nr.: 51816001T**

Temperiereinheit mit Schlauchanschluss für Scheidetrichter.
Zur Befestigung am Stativsystem mit Anschlüssen für Zu – und Ablauf.
Scheidetrichter parallel geschaltet.

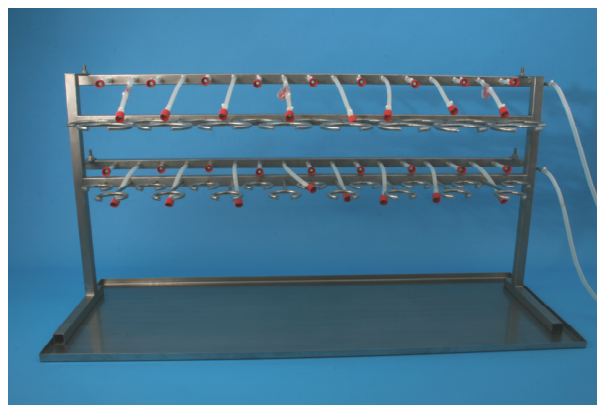**Art.-Nr.: 51816001A**

Edelstahlwanne zum Auffangen von überlaufender Flüssigkeiten.

